

鹵素燈線型加熱器 實驗室配套元件

LKHLH-55A/f25/200v-2kw + HCV

高溫加熱很簡單!



◆ 特徵 ◆


- 1). 因為成為配套元件，在簡單鹵素燈線型加熱器能使用。
- 2). 能用非接觸簡單高溫面加熱。
- 3). 手動升降平台，它可以很容易地照射直徑變化規律。
- 4). 手動可變電源，它可以很容易地由電壓改變加熱調整。
- 5). 高溫加熱很簡單 內置冷卻風扇!

Heat-tech



【 木材的線加熱 】


它可以在大體積為手動可變電源的AC0v～AC200V被改變。
在電壓調整所述可變電源，可以調節加熱溫度。
從低溫到高溫是自由自在。

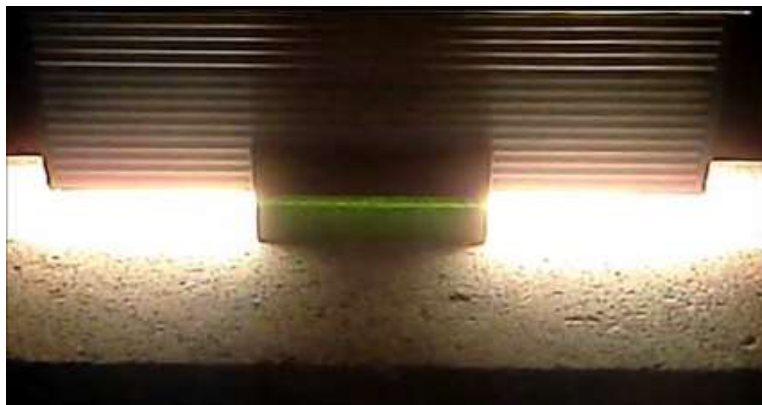

【 輸出:200v-2kw 】

因為最大輸出1kw的發燒發光非常晃眼閃亮。
能用非接觸簡單高溫面加熱。

如果您透過防護玻璃看，這是真的。
使用隨附的安全眼鏡可以輕鬆地在視覺上定位照射線。

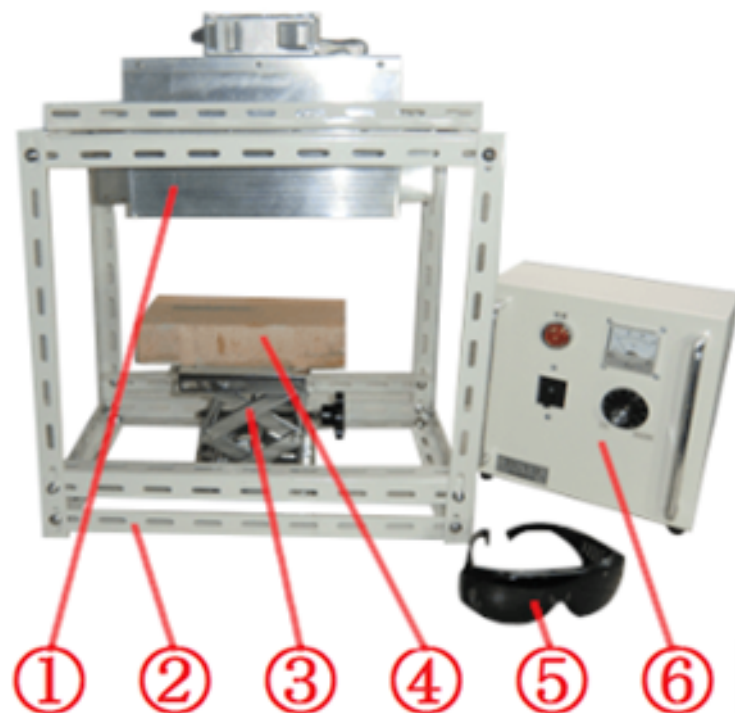



實驗室配套元件裝配例子

(※實驗室配套元件用零部件單體被交貨。)

- ① 空冷式鹵素燈線型加熱器 HLH-55A/f25/200v-2kw
用2kw的輸出，加熱對象物。
- ② 立体安裝支架
- ③ 手動升降平台
- ④ 磚 擱置試片時很有用。
- ⑤ 高亮度光對應的防護眼鏡
- 目測能確認最大輸出時的高亮度照射點。
- ⑥ 手動電源控制器 HCV-AC200-240V/-AC200V-2KW
輸入電壓範圍為AC200V-AC240V。輸出可調範圍AC0v~200v。

【實驗配套元件 實際配線圖】

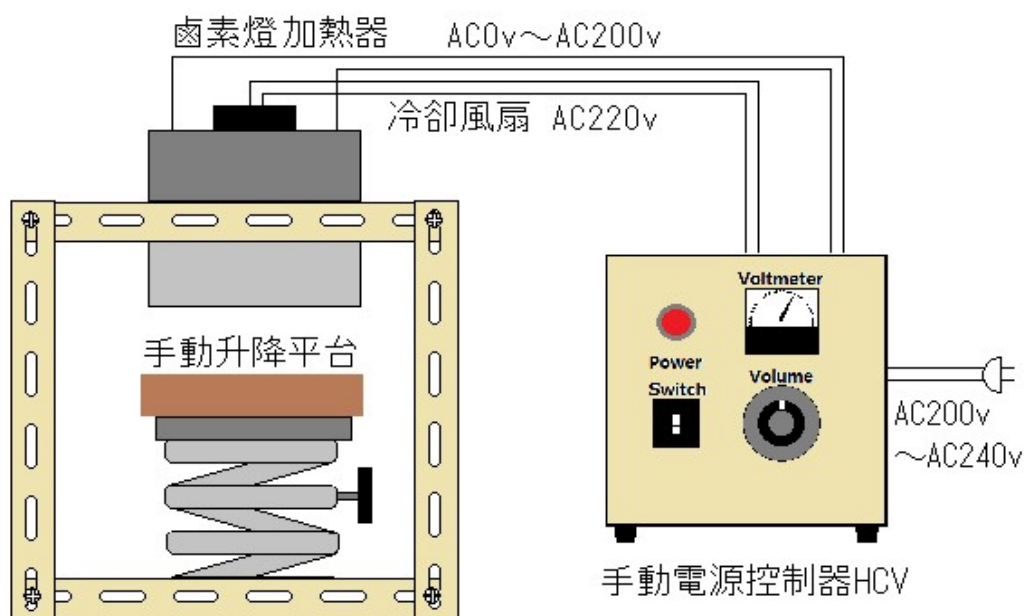


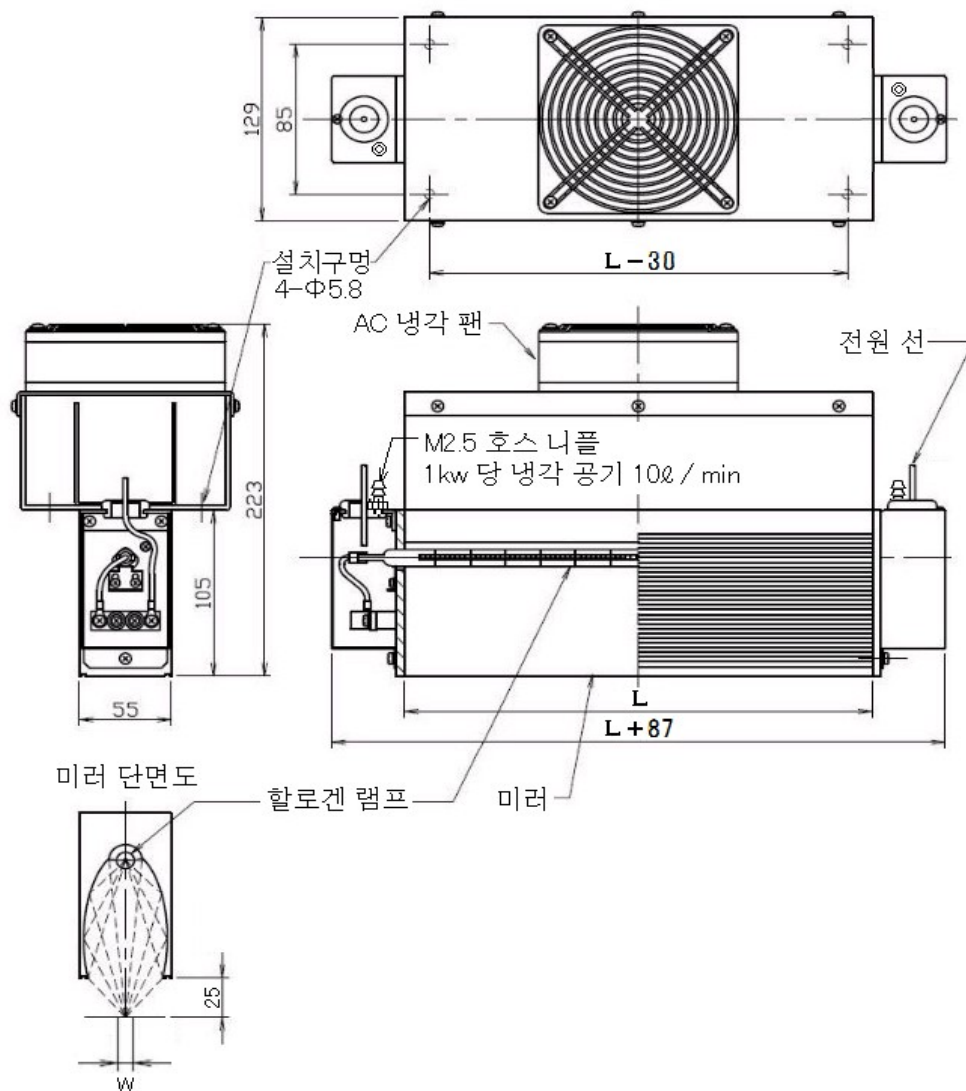

【주의 사항】

- ① 할로겐 라인 히터는 $\pm 3^\circ$ 이내의 평행도에 설치하십시오.
- ② 수직 설치시 옵션의 수직 사양 램프(+V)를 사용하십시오.
- ③ 고온 텅스텐 필라멘트는 부드럽고 약해집니다.
진동을 주지 마십시오.
- ④ 설치 구멍은 미러 길이에 의해서 바뀝니다.
- ⑤ 실내 온도가 높아지면 냉각 효과가 감소합니다.
수냉형의 HLH-55W를 사용하십시오.
- ⑥ 집광선의 폭(W)은 텅스텐 필라멘트 코일 지름과 동입니다.

초점거리 f	f25
미러길이 L	280
전압 v	200v
전력 w	2kw
형식	HLH-55A/f25/L280/200v-2kw/ACfan
품명	수냉식 집광 형 할로겐 라인 히터

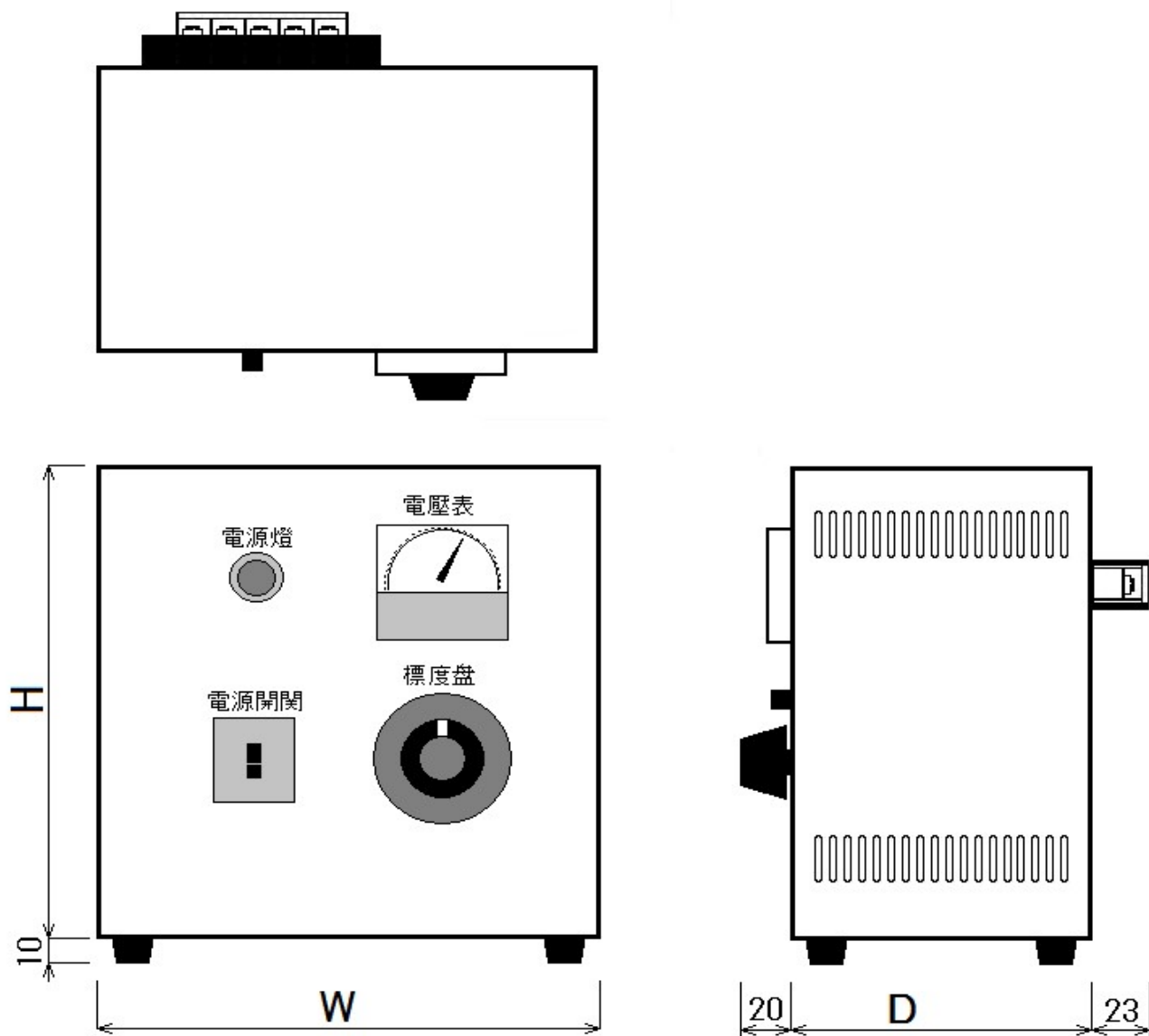

電源電壓	AC220V
制御電圧	AC0~200V
制御電力	5KW
風扇電源	AC220V
高度(H)	250
寛度(W)	250
深度(D)	120
型號	HCVAC-220V/200V-5kw
品名	冷卻風扇用AC端子搭載 鹵素燈加熱器 手動電源控制器

日付 2017.4.4

Heat-tech

非接触高速加熱

Heat-tech

熱科技有限公司

<https://heater.heat-tech.biz/tc/>

日本國 650-0047 神戸市中央区港島南町1丁目6番地5號

IMDA 國際醫療開發中心

TEL 81-78945-7894 FAX 81-78945-7895

E-mail info@heat-tech.biz